



ELEEELS

**A1** | Trådløst ben massageapparat med luft kompression

Brugervejledning

**TRÅDLØS OG GENOPLADELIG**  
2000mAh Lithium-ion Batteri

**LETVÆGTS DESIGN**  
1.1 bs. / 500 g pr enhed

DA/  
NO

DA/  
NO

ELEEELS A1 ben massageapparat er udviklet med fokus på at afhjælpe og mindske gener, og træthed, i lægmusklen samt forbedre blodcirkulationen.

#### SPECIFIKATIONER

All-in-one Smart Kontrol knap

6 massage zoner

Effektivt luft tryk:  
20 kPa - 60 kPa

3 Individuelle Air Bags

#### 3 forskellige massage typer, samt 2 styrker

Hurtig (10 mins)  
Blid (20 mins)  
Dynamisk (15 mins)

Batteriindikator /  
Indikator for  
massage-tilstand

Strømindikator  
Lav eller  
Høj

- 1) 3 individuelle air bags
- 2) 6 massage zoner
- 3) 2000mAh Lithium-ion Batteri (op til 3 timers brug per opladning)
- 4) Velcro straps
- 5) All-in-one Smart control knap
- 6) 2 massage styrker(niveauer)
- 7) 3 massage typer for optimal komfort
- 8) Fuldt trådløs og lav vægt (500 g pr styk)

Luft tryk: varierer fra 20 kPa til 60 kPa  
Vægt: 1.1 lbs. / 500 g stk  
Opladning via: USB Type-C

#### OPLADNING

Det anbefales at oplade batteriet til 100% inden ibrugtagning.

Gør følgende for at oplade batteriet:

- 1) Forbind det medfølgende USB-C kabel til USB-C stikket på A1. Forbind derefter kablet til en kompatibel USB opladningskilde.

#### BETJENING

- Start ved at tænde for A1. Tryk 2 gange på Smart controller knappen for at tænde.
- Vælg derefter massage styrke (Lav eller Høj) ved at dreje Smart controller knappen mod urets retning. "Lav" styrke indikeres ved at LED indikatoren lyser svagt, men "Høj" styrke indikeres ved at LED lyser kraftigt.
- Derefter vælges massage type ved stepvis at dreje Smart controller knappen i urets retning (med uret). På denne måde skiftes der imellem "Hurtig", "Blid" eller "Dynamisk" massage type.
- "Hurtig" er en 10 minutters massage behandling der fokuserer på hurtigt at massere læg-musklen og minimere træthed/ømhed samt øge blod cirkulationen. LED vil være Blå når der er valgt "Hurtig" massage.
- "Blid" er en 20 minutters massage behandling der er optimeret til at give dyb muskel afslapning og øget velvære. LED vil lyse Lilla når der er valgt "Blid" massage type.
- "Dynamisk" er en 15 minutters kombineret massage type der masserer i dybden samtidig med at give afslapning. Når denne massage type er valgt vil LED lyse hvidt
- \* Hvis batteri niveauet kommer ned på 10% så vil LED skifte til rød farve. Massagen kan fortsætte I nogle minutter derefter inden A1 slukker automatisk.
- A1 slukker automatisk efter hver massage session. Alternativt kan man slukke manuelt ved at trykke 2 gange på Smart controller knappen.

#### VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Hvis der skulle være behov for let rengøring, skal det gøres med en let fugtet klud og eftertørres med en ren og tør klud.
- Man kan vaske den inderste del på max 30grader og der må ikke benyttes blegemidler. Der må heller ikke benyttes tørretumbling. Den inderste del kan adskilles fra resten vha. Velcro stropperne.
- Benyt altid det medfølgende USB type C kabel til opladning af ELEEELS A1.
- Opbevar altid A1 i rene og tørre omgivelser.

#### BEMÆRK

- Brug ikke A1 i mere end én time ad gangen. Lad A1 "hvile" i ca. 10 minutter inden den benyttes igen.

#### ADVARSEL OG SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER


- Smid ikke A1 ned i vand eller lign. Hold A1 væk fra væsker eller stærk varme.
- Benyt ikke A1 i meget støvede omgivelser.

DA/  
NO

- 2) Opladningshastigheden afhænger af hvilken opladningskilde der benyttes. Det anbefales at benytte en opladningskilde (AC/DC adaptor) der som minimum er 5V/2A. Dette vil betyde en opladningstid fra 0-100% på ca. 3 timer.
- 3) Batteri LED indikatoren vil blinke langsom grønt under opladning. Når den grønne LED lyser constant er batteriet fuldt opladet.
- 4) Batteri indikatoren på A1 viser batteri niveauet jf. nedenstående:
  - Rød: 0-10%
  - Grøn: 10-100%



#### FORBEREDELSE/PÅSÆTNING (LÆG MASSAGE)

- 1) Montér den højre enhed/side først.
- 2) Start fra hælen så A1 sidder ca. lige over hælen.

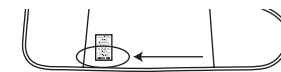

- 3) Kontrollér at A1 er placeret lige. Hele vejen fra hælen og op ad læggen.

- 4) Fastspænd A1 vha. velcroen startende fra hælen og opad. Fastspænd så A1 sidder tæt/stramt men ikke for stramt.

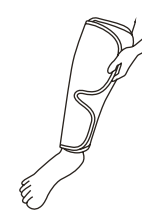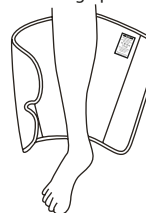


- 5) Gør det same for venstre ben.


DA/  
NO

#### FORBEREDELSE/PÅSÆTNING (FOD)

- 1) Montér den højre enhed/side først



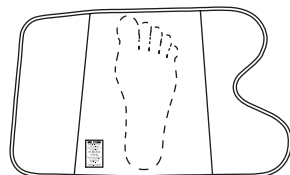


- 2) Montér A1 så den nederste del flugter med hælen

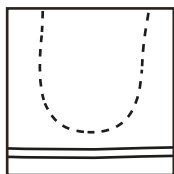

- 3) Fastspænd A1, startende fra hælen og til sidst ved tæerne. Fastspænd velcro så A1 sidder stramt men ikke for stramt.

- 4) Gør det same for venstre fod. BEMÆRK: Gå ikke rundt, eller støt ikke på fødderne når A1 benyttes til fod massage.

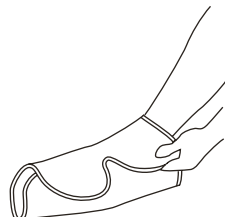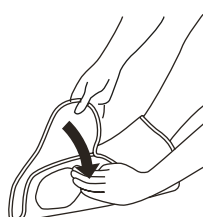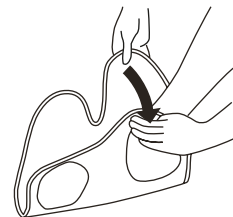

DA/  
NO

DA/  
NO

- Forsøg ALDRIG at åbne/adskille A1.
- Tab eller smid ikke din A1 da den kan blive beskadiget.
- Vi anbefaler at A1 max benyttes i én time ad gangen. Hold derefter 10-15 mins pause inden A1 benyttes igen.
- A1 bør kun benyttes af voksne. Benyt ikke A1 hvis du har skader.
- Er du i tvivl, så spørg altid din læge om gode råd i forbindelse med slag massage og brugen af massageapparater generelt.
- Benyt A1 på tørre og rene områder af kroppen. Benyt et let tryk og bevæg A1 hen over området i max 60 sekunder per område.
- Benyt KUN ELEEELS slagmassage enheder på kroppens bløddeler (muskler). Og tryk med en let kraft der føles behagelig. Benyt IKKE massagen i hovedet eller på hårde områder af kroppen (knogler eller lignende). Stop massagen øjeblikkeligt hvis der føles ubehagelig smerte.
- Bemærk: Ved brug eller opladning bør A1 altid være indenfor "opsyn".

#### ANSVARSFRAKRIVELSE

Benyt IKKE ELEEELS slagmassage apparater uden først at konsultere din læge. Det er dit eget ansvar at sikre, at det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at du benytter ELEEELS slagmassage apparater eller andre massageapparater i øvrigt. Kontakt ALTID din egen læge hvis du er i tvivl om ovenstående!

#### GARANTI

PRODUKTET ER OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL DE LOKALE GARANTIBESTEMMELSER I DET LAND/REGION HVORI PRODUKTET ER KØBT. PRODUKTGARANTIE DÆKKER FEJL OG/ELLER DEFEKTER DER SKYLDES MATERIALEFEJL ELLER PRODUKTIONSFEJL. HVIS DER ER TALE OM SÅDANNE FEJL/DEFEKTER VIL ELEEELS OMKOSTNINGSFRIT REPARERE ELLER OMBYTTET PRODUKTET.

#### GARANTIE DÆKKER IKKE

- (a) Skader forårsaget af uheld, forkert brug/håndtering eller transportskader;
- (b) Skader forårsaget af uautoriseret forsøg på reparation eller lignende;
- (c) Skader som skyldes at produktet ikke er brugt i henhold til de beskrevne anvisninger;
- (d) Skader som skyldes forkert håndtering, opladning eller opbevaring;



RoHS

